


minimus® II

**Riester**

The familiar way

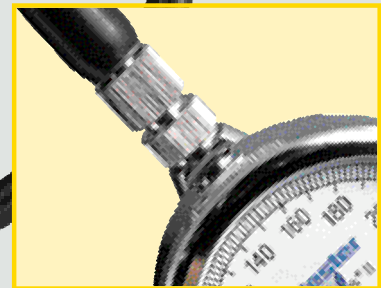

**Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.** Rugged, easily operated, in pioneering quality. The chromium-plated screwed tube connection at the top and the ergonomic spoon-shaped grip ensure that minimus® II can be operated without hindrance at any time. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Compact, single-tube, graduated-scale sphygmomanometer
- Highly polished chromium-plated, rugged metal housing with metal ring, corrosion-protected
- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Metal valve base
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Cotton bandage cuff, adult  
Cotton hook cuff, adult  
Calibrated nylon velcro cuff, adult

black  
**No. 1310**  
**No. 1311**  
**No. 1312**

**Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.** Robust, leicht bedienbar, in wegweisender Qualität. Durch die oben angebrachte verchromte Schlauchverschraubung und den ergonomischen Löffelgriff ist minimus® II jederzeit ungehindert zu bedienen. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Kompaktes 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät
- Hochglanz verchromtes, stabiles Metallgehäuse mit Metallring, korrosionsgeschützt
- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
- Ventilsockel aus Metall
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg
- Inkl. Vinyl-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen

Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene  
 Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene  
 Kalibr. Nylon-Klettenmansch. Erwachsene

schwarz  
**Nr. 1310**  
**Nr. 1311**  
**Nr. 1312**

**Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.** Robuste, facile à manipuler, d'une qualité révolutionnaire. La position haute de son raccord chromé à vis pour tubulure ainsi que sa poignée ergonomique en forme de cuiller permettent d'utiliser minimus® II à tout moment, sans qu'aucun obstacle n'apparaisse. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Tensiomètre à cadran, compact, à un tube
- Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec anneau métallique, protégé contre la corrosion
- Poire latex avec valve de décompression chromée
- Socle de valve en métal
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
- Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Brassard enveloppant, en coton, adulte  
 Brassard à crochets, en coton, adulte  
 Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte

noir  
**N° 1310**  
**N° 1311**  
**N° 1312**

**Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.** Robusto, fácil de manejar, con la máxima calidad. Gracias a la unión atornillada del tubo situada en la zona superior y al mango de cuchara ergonómico, el minimus® II puede utilizarse en todo momento sin obstáculos. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo
- Resistente carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, protegida contra la corrosión
- Pera de látex con válvula de purga cromada
- Base de válvula metálica
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
- Incl. bolsa de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes

Brazaletes de algodón arrollable, adultos  
 Brazaletes de algodón con gancho, adultos  
 Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos

negro  
**No. 1310**  
**No. 1311**  
**No. 1312**

**высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.** Прочный, простой в обслуживании, высочайшего качества тонометр. С металлическим зажимом, расположенным сверху, и эргономичной рукояткой. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Компактный anerоидный прибор для измерения кровяного давления с одним шлангом.
- Прочный металлический корпус и металлическое кольцо хромированы.
- Латексная груша с хромированным спускным клапаном.
- Металлическое основание клапана.
- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.
- Рукоятка из нержавеющей стали.
- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной.
- Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт.ст.
- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт.ст.
- В виниловой сумке на молнии.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

Тонометр с обматывающей манжетой для взрослых  
 Тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых  
 Тонометр с манжетой на липучке для взрослых

черный  
**№ 1310**  
**№ 1311**  
**№ 1312**